



40+

Zubehör für
Ihre medizinischen
Betten von
Arjo

ZUBEHÖRBROSCHÜRE

Ein einheitliches Konzept für unsere Klinikbetten

Enterprise – Citadel – Citadel Plus



Zubehör zur besseren Pflege

Das universelle Konzept für medizinische Klinikbetten (Universal Medical Bed Platform, UMBP) bietet zahlreiches Zubehör für Betten, das viele Vorteile für Patienten und Pflegekräfte hat. Dieses Zubehör, das speziell für das UMBP entwickelt wurde, entspricht den gleichen hohen Qualitätsstandards wie die Betten selbst.

UMBP-Zubehör kann unabhängig vom Bett bestellt werden und lässt sich nach Bedarf nachträglich am Bett montieren (sofern nichts anderes angegeben ist). Alle Zubehörteile sind sorgfältig geprüft, um die Kompatibilität mit den angegebenen UMBP-Bettmodellen zu gewährleisten.

Alle Zubehörteile für unsere medizinischen Klinikbetten entsprechen den neuesten Stabilitäts-, Abmessungs- und Sicherheitsanforderungen der Norm DIN EN 60601-2-52; dies wurde von der weltweit anerkannten Prüforganisation UL (Underwriters Laboratories) unabhängig bestätigt.



Zusammenfassung

ZUBEHÖRTYP	ZUBEHÖRARTIKEL	ARTIKELNUMMER	SEITE
Infusionsständer	Infusionsständer (2kg sichere Arbeitslast)	ENT-ACC02	4
	Infusionsständer (Stahlhaken, 5kg sichere Arbeitslast)	ENT-ACC02 SH	4
	Gewinkelter Infusionsständer	ENT-ACC04	4
	4-E-Infusionsständer (Stahlhaken, 5kg sichere Arbeitslast)	ENT-ACC71	4
	Einklappbarer integrierter Infusionsständer	ENT-ACC89	4
	Zusätzliche Haken für den Infusionsständer	ENT-ACC14	4
	Infusionsständer (Schwerlast-Ausführung)	ENT-ACC24	5
	Spritzenpumpenhalter	ENT-ACC07	5
	Infusionshalter für Patientenaufrichter	ENT-ACC65	5
Patientenaufrichter	Fixierbarer Patientenaufrichter mit Befestigungsband und Griff	ENT-ACC01	6
	Rotierbarer Patientenaufrichter	ENT-ACC03	6
	Bariatrischer Patientenaufrichter	ENT-ACC101	6
Sauerstoffflaschenhalter	Flaschenhalter 100 – 108mm Flaschendurchmesser	ENT-ACC08	7
	Flaschenhalter 119 – 122mm Flaschendurchmesser	ENT-ACC58	7
	Flaschenhalter 140 – 151mm Flaschendurchmesser	ENT-ACC18	7
Wartungsset, Intensiv-Kopfteil, Matratzen-Aufbewahrungstasche	Wartungsset	ENT-ACC23	7
	Intensiv-Kopfteil	ENT-ACC34	7
	Matratzen-Aufbewahrungstasche für Citadel-Lagerungssysteme	ENT-ACC80	7
Traktions- und Frakturrahmen	Kleine Traktionsvorrichtung (ohne Gewichte)	ENT-ACC10	8
	Traktionsbaugruppe für Kopfbende (ohne Gewichte)	ENT-ACC32	8
	Traktions-Adapter	ENT-ACC33/1 & ENT-ACC33/2	8 8
	Vollständiger Frakturrahmen (ohne Gewichte)	ENT-ACC05	8
Sonstiges	Urinflaschenhalter - standard	ENT-ACC19	9
	Urinflaschenhalter - breit	ENT-ACC69	9
	Doppelter Flaschenhalter	ENT-ACC12	9
	Netzkabelhalter	ENT-ACC15	9
	Halter für Messgeräte	ENT-ACC26	9
	Monitorhalterung	ENT-ACC64	10
	Monitorhalterung	ENT-ACC20	10
	Monitorhalterung	ENT-ACC53	10
	Steckbeckenhalter	ENT-ACC56	10
	Lückenschluss-Einsatz	ENT-ACC66	10
	Sicherheitsseiten-Erweiterung zum Herunterklappen	ENT-ACC67	10
	Halterung für Oxylog-Geräte	ENT-ACC40	11
	Steuerbox-Tropfabdeckung E5000X	ENT-ACC63	11
	Liegeflächenspaltfüller	ENT-ACC72	11
	Fußbrett-Haltevorrichtung für Citadel	ENT-ACC81	11
	Transport-Halterung für Citadel	ENT-ACC82	11
	Halterung für den Handschalter für Pflegepersonal (AKF)	ENT-ACC11	11
	¾-Sicherheitsseitenpolster für Enterprise 5000/5000x	ENT-ACC06	12
	Seitenpolster	ENT-ACC31	12
	Flaschenhalter	ENT-ACC17	12

Infusionsständer



ENT-ACC02



ENT-ACC02-SH



ENT-ACC04

Infusionsständer

Dieser gerade und höhenverstellbare Infusionsständer mit zwei Kunststoffhaken ist für die Befestigung von Flüssigkeitsbeuteln und anderer Infusionsausrüstung vorgesehen.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 2kg pro Haken
- Produktgewicht 1,5kg
- Bei Bedarf kann das Zubehör ENT-ACC14 auf vier Haken erweitert werden
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel

Infusionsständer (Stahlhaken)

Dieser gerade und höhenverstellbare Infusionsständer mit zwei Stahlhaken ist für die Befestigung von Flüssigkeitsbeuteln und anderer Infusionsausrüstung vorgesehen.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 5kg pro Haken
- Produktgewicht 1,8kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel (nicht Citadel Plus)

Infusionsständer gewinkelt

Dieser gewinkelte Infusionsständer mit zwei Haken bietet eine größere Flexibilität für eine optimale Positionierung.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 2kg pro Haken
- Produktgewicht 1,7kg
- Bei Bedarf kann das Zubehör ENT-ACC14 auf vier Haken erweitert werden
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel



ENT-ACC71



ENT-ACC89



ENT-ACC14

4-Ecken-Infusionsständer (Stahlhaken)

Gerader Infusionsständer und Stahlhaken für eine größere sichere Arbeitslast (SAL).

- Sichere Arbeitslast (SAL) 5kg pro Haken
- Produktgewicht 1,8kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel

Einklappbarer integrierter Infusionsständer

Dieser gewinkelte Infusionsständer mit zwei Haken bietet eine größere Flexibilität für eine optimale Positionierung.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 2kg pro Haken
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel (nicht Citadel Plus)

Zusätzliche Haken für den Infusionsständer

Dieses Zubehör passt zu den Modellen ENT-ACC02 und ENT-ACC04 und verändert diese Produkte in Infusionsständer mit vier Haken.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 2kg pro Haken
- Kompatibel mit allen Infusionsständern mit Kunststoffhaken (keine Stahlhaken)

ZUBEHÖRARTIKEL:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC02-SH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC04	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC71	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC89	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Enterprise-Betten, die während oder nach 2013 eingeführt wurden, enthalten ein X nach dem Namen.

Infusionsständer



ENT-ACC24



ENT-ACC07



ENT-ACC65

Infusionsständer (Schwerlast-Ausführung)

Ein höhenverstellbarer Infusionsständer mit höherer sicherer Arbeitslast (SAL) und vier Edelstahlhaken.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 15 kg
- Produktgewicht 1,5 kg
- 5 kg pro Haken darf nicht überschritten werden
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel

Spritzenpumpenhalter

Ständer mit zwei Haken an einer 25-mm-Stange zur Befestigung einer Spritzenpumpe oder ähnlicher Ausrüstung.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 2 kg pro Haken
- Produktgewicht 1,7 kg
- Zusätzlich bis zu 10 kg für am Infusionshalter befestigtes Zubehör
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel

Infusionshalter für Patientenaufrichter

Der Infusionshalter kann zur Befestigung von Flüssigkeitsbeuteln an einem Patientenaufrichter angebracht werden.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 3 kg pro Haken
- Produktgewicht 0,3 kg
- Kompatibel mit den Patientenaufrichtern ACC01 und ACC03

ZUBEHÖRARTIKEL:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Enterprise-Betten, die während oder nach 2013 eingeführt wurden, enthalten ein X nach dem Namen.

Patientenaufrichter



ENT-ACC01

Fixierbarer Patientenaufrichter/ Befestigungsband/Griff

Der Haltebügel dieses Patientenaufrichters wird mittig über dem Bett angebracht und dient dem Patienten zur Unterstützung für das selbständige Positionieren. Der Haltebügel wird mit einem verstellbaren Befestigungsband mit Griff geliefert.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 75 kg
- Produktgewicht 8 kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel



ENT-ACC03

Rotierbarer Patientenaufrichter

Dieser Patientenaufrichter hilft selbständigen Patienten, sich in ihrem Bett allein umzupositionieren. Das Gestell lässt sich vom Bettrahmen aus einstellen und hilft so auch bei Transfers in einen Rollstuhl. Ein verlängerbares Befestigungsband mit Griff ist enthalten.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 75 kg
- Produktgewicht 9,2 kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel



ENT-ACC101

Bariatrischer Patientenaufrichter

Der Patientenaufrichter ist eine Aufrichthilfe, die es schweren Patienten ermöglicht, sich selbstständig in ihrem Bett umzupositionieren. Er ist mit einem verstellbaren Befestigungsband mit Griff ausgestattet.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 150 kg
- Produktgewicht 20,1 kg
- Kompatibel mit dem bariatrischen Pflegesystem Citadel Plus

ZUBEHÖRARTIKEL:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC101												•

Enterprise-Betten, die während oder nach 2013 eingeführt wurden, enthalten ein X nach dem Namen.

Sauerstoffflaschenhalter



ENT-ACC08

Flaschenhalter 100-108 mm

- Maximale Flaschenhöhe 870 mm
- Produktgewicht 2,2 kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel



ENT-ACC58

Flaschenhalter 119-122 mm

- Maximale Flaschenhöhe 870 mm
- Produktgewicht 2,6 kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel



ENT-ACC18

Flaschenhalter 140-151 mm

- Maximale Flaschenhöhe 870 mm
- Produktgewicht 2,8 kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel

Wartungsset, Intensiv-Kopfteil, Matratzen-Aufbewahrungstasche



ENT-ACC23

Wartungsset

Das Betten-Service-Kit enthält die in der Abbildung oben gezeigten Einzelteile und ist für Wartungsarbeiten an den Betten der Serie Enterprise vorgesehen.



ENT-ACC34

Intensiv-Kopfteil

Dieses Kopfteil ist für den Gebrauch auf Intensivstationen (IS) vorgesehen, wo Kopf und Oberkörper des Patienten jederzeit zugänglich bleiben müssen. Zur besseren Manövrierbarkeit bei Transporten mit Schiebegriffen ausgestattet.

- Produktgewicht 4,7 kg



ENT-ACC80

Matratzen-Aufbewahrungstasche für Citadel-Lagerungssysteme

- Kompatibel mit allen Citadel-Oberflächen C100 & C200

ZUBEHÖRARTIKEL:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC08	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC34	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC80										•	•	

Enterprise-Betten, die während oder nach 2013 eingeführt wurden, enthalten ein X nach dem Namen.

Traktions- und Frakturrahmen



ENT-ACC10

Kleine Traktionsvorrichtung (ohne Gewichte)

Besteht aus mehreren Stangen und Halterungen, die auf verschiedene Weisen zusammengebaut werden können.

- Die sichere Arbeitslast (SAL) beträgt 80 kg für die gesamte Traktionsbaugruppe und 10 kg für jeden Rollenzug.

Beschreibung	Menge	Gewicht
Längsbalken	2	0,6 kg
Doppelschraubenhalterung	2	0,5 kg
Querstange	1	0,7 kg
Gerader Balken mit Halterung	1	0,9 kg
E Schutzball aus Schaumstoff	2	0,1 kg
Halterung mit Rollenzug	2	0,1 kg

- Kompatibel mit allen Betten der Serie Enterprise und Citadel



ENT-ACC32

Traktionsbaugruppe für Kopfende (ohne Gewichte)

Diese Extensionsvorrichtung zur Befestigung am Kopfende des Bettes wird zur Strecktherapie von Kopf, Armen oder Oberkörper des Patienten verwendet.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 20 kg
- Ein verstellbarer Höhenzug wird mitgeliefert
- Gurte und Gewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel



ENT-ACC33/1 & ENT-ACC33/2

Traktions-Adapter

Dieses Zubehör ermöglicht die Verwendung von Zimmer- und Mizuho-OSI-Traktionsgeräten an Krankenhausbetten des Typs Enterprise Plus, die mit einem Patientenwiegesystem ausgestattet sind (Enterprise-Plus-Betten sind in Deutschland nicht zugelassen).

- Sichere Arbeitslast (SAL) 75 kg

Beschreibung	Menge	Gewicht
Adapterrahmen	1	4,0 kg
Erweitertes Rahmenezubehör für Zimmer		5,9 kg
Erweitertes Rahmenezubehör für Mizuho-OSI		6,7 kg

- Kompatibel mit Betten der Enterprise-Serien 9600, 9700 und 9800 (diese Enterprise-Betten sind in Deutschland nicht zugelassen).



ENT-ACC05

Vollständiger Frakturrahmen (ohne Gewichte)

Bietet eine steife orthopädische Struktur, die angepasst und eingestellt werden kann, um allen gängigen Traktionsarten zu entsprechen.

- Die sichere Arbeitslast (SAL) beträgt 70 kg für die gesamte Traktionsbaugruppe und 20 kg für jeden Rollenzug

Beschreibung	Menge	Gewicht
Bügel am Kopfende	1	4,7 kg
Bügel am Fußende	1	7,1 kg
Längsträger mit Halterung	1	4,2 kg
Doppelschraubenhalterung	1	0,5 kg
Verstellbares Gurtband mit Griff	1	0,2 kg
Gerader Balken mit Halterung	1	0,9 kg
Schutzball aus Schaumstoff	2	< 0,1 kg pro Stück
Potentialausgleichskabel	1	< 0,1 kg
Lieferung zusammen mit Artikel A		
Rollhalterung	3	je 0,1 kg
Zubehörbuchse (Bestandteil von Artikel A)	2	N. z.

- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel

ZUBEHÖRARTIKEL:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC33/1 & ENT-ACC33/2							•	•	•			
ENT-ACC05	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Enterprise-Betten, die während oder nach 2013 eingeführt wurden, enthalten ein X nach dem Namen.

Sonstiges



ENT-ACC19

Urinflaschenhalter – standard

Der Flaschenhalter lässt sich griffbereit an der Sicherheitsseite anhängen.

- Produktgewicht 0,4 kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel




ENT-ACC69

Urinflaschenhalter – breit

Der Beutelhälter kann an die Drainagebeutel- oder DIN-Schienen angebracht werden.

- Produktgewicht 0,4 kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel

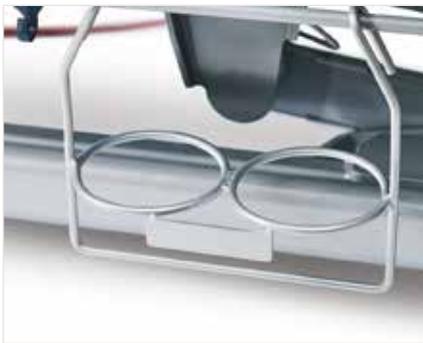

ENT-ACC12

Doppelter Flaschenhalter

Platz für zwei 500-ml-Flüssigkeits-/Drainageflaschen. Wird an der Drainagebeutelschiene unter der Liegefläche montiert.

- Produktgewicht 0,3 kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel



ENT-ACC15

Netzkabelhalter

Ein Haken für Netzstromkabel wird standardmäßig mit jedem Bett mitgeliefert. Weitere Haken können außerdem separat nachbestellt werden.

- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel



ENT-ACC26

Halter für Messgeräte

Dieses Zubehör zum Festklemmen ist z. B. für Blutdruckmessgeräte (-transducer) und deren Zubehör auf Intensivstationen vorgesehen.

- Produktgewicht 0,8 kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel

ZUBEHÖRARTIKEL:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Enterprise-Betten, die während oder nach 2013 eingeführt wurden, enthalten ein X nach dem Namen.

Sonstiges



ENT-ACC64

Monitorhalterung

Für Überwachungs- und Diagnosegeräte.
Wird am Fußende des Bettes montiert.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 12 kg
- Produktgewicht 5,5 kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel



ENT-ACC20

Monitorhalterung

Für Überwachungs- und Diagnosegeräte.
Wird am Fußende des Bettes montiert.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 12 kg
- Produktgewicht 5,5 kg
- Geeignet für Betten mit einer 88-cm-breiten Matratzenliegefläche, z. B. für Betten der Serien Enterprise 5000 (Modelle 5000A/B/C/D/N/P), 5300, 8000 und 9000.
- Kompatibel mit Betten der Serien Enterprise 5000, 8000 und 9000 (nicht für X-Modelle geeignet)



ENT-ACC53

Monitorhalterung

Für Überwachungs- und Diagnosegeräte.
Wird am Fußende des Bettes montiert.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 12 kg
- Produktgewicht 5,5 kg
- ENT-ACC53 ist geeignet für Betten mit einer 82-cm-breiten Matratzenliegefläche, z. B. für Betten der Serien Enterprise 5000 (Modelle 5000J/K/L/M/R/S), 5100 und 5200.
- Kompatibel mit Betten der Serien Enterprise 5000, 8000 und 9000 (nicht für X-Modelle geeignet)



ENT-ACC56

Steckbeckenhalter

Der Steckbeckenhalter wird griffbereit an die Außenseite des Fußbretts angehängt.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 1 kg
- Produktgewicht 0,7 kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serien Enterprise und Citadel



ENT-ACC66

Lückenschluss-Einsatz

Der Lückenschluss-Einsatz ist dafür vorgesehen, bei Bedarf den Abstand zwischen dem Fußteil des Bettes und der Sicherheitsseite zu schließen. Die Einsätze lassen sich schnell und einfach einstecken.

- Paarweise geliefert
- Produktgewicht 9,5 kg
- Geeignet für Standardlängen (235 cm) und Verlängerungen (247 cm) der Betten der Serien Enterprise E5000X, E8000X und E9000X



ENT-ACC67

Sicherheitsseiten-Erweiterung zum Herunterklappen

Die Sicherheitsseiten lassen sich mit den Zusatzholmen um 12 cm erhöhen.

- Produktgewicht 3 kg
- Nur mit Betten der Serie Enterprise 5000X (E5X) kompatibel

ZUBEHÖRARTIKEL:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC64	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC20	•		•		•							
ENT-ACC53	•		•		•							
ENT-ACC56	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ENT-ACC66	•	•	•	•	•	•						
ENT-ACC67		•										

Enterprise-Betten, die während oder nach 2013 eingeführt wurden, enthalten ein X nach dem Namen.

Sonstiges



ENT-ACC40

Halterung für Oxylog-Geräte

Dient zum Anhängen des tragbaren Beatmungsgeräts Oxylog®.

- Sichere Arbeitslast (SAL) 20 kg
- Produktgewicht 0,5kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serie Enterprise



ENT-ACC63

Steuerbox-Tropfabdeckung E5000X

- Produktgewicht 0,35kg
- Kompatibel mit allen Betten der Serie Enterprise X



ENT-ACC72

Liegeflächenspaltfüller


Dieses Zubehör lässt sich bequem und einfach unter die Bodenplatte schieben.



ENT-ACC81

Fußbrett-Haltevorrichtung für Citadel

- Kompatibel mit allen Betten der Serie Citadel (nicht Citadel Plus)

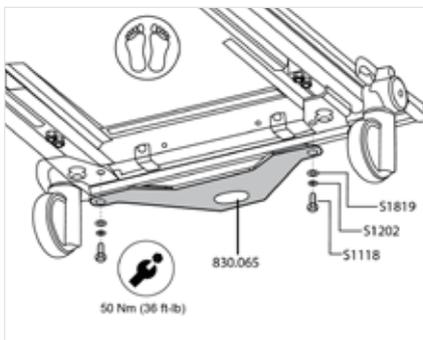

ENT-ACC82

Transport-Halterung für Citadel

- Kompatibel mit allen Betten der Serie Citadel (nicht Citadel Plus)



ENT-ACC11

Halterung für den Handschalter für Pflegepersonal (AKF)

Dieser Handbedienungshalter für die Steuerkonsole des Anwenderkontrollfelds (= AKF) wird in bequemer Höhe und Neigung am Fußende des Bettes angebracht.

- Kompatibel mit Betten der Serien Enterprise 5000/5000X und 8000X

ZUBEHÖRARTIKEL:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC40	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
ENT-ACC63		•		•		•	•	•	•			
ENT-ACC72		•		•		•	•	•	•			
ENT-ACC81										•	•	
ENT-ACC82										•	•	
ENT-ACC11	•	•		•								

Enterprise-Betten, die während oder nach 2013 eingeführt wurden, enthalten ein X nach dem Namen.

Sonstiges



ENT-ACC06

¾-Sicherheitsseitenpolster für Enterprise 5000/5000x

Sicherheitsseitenschutzpolster für einklappbare ¾-Sicherheitsseitengitter.

- Kompatibel mit allen Betten der Serie Enterprise 5000
- Paarweise geliefert



ENT-ACC31

Seitenpolster

Sicherheitsseitenschutzpolster für zwei geteilte Sicherheitsseiten.

- Kompatibel mit Betten der Serien Enterprise 5000X, 8000, 8000X, 9000 und 9000X
- Paarweise geliefert



ENT-ACC17

Flaschenhalter

Halter für passende Drainagebehälter. Wird am Kopfende des Bettes platziert.

- Fassungsvermögen: 2l

ZUBEHÖRARTIKEL:	E5000	E5000X	E8000	E8000X	E9000	E9000X	E9600X	E9700X	E9800X	CITADEL BFS	CITADEL PTS	CITADEL PLUS
ENT-ACC06	•	•										
ENT-ACC31		•	•	•	•	•						
ENT-ACC17	•	•										

Enterprise-Betten, die während oder nach 2013 eingeführt wurden, enthalten ein X nach dem Namen.

Nicht alle Zubehörteile sind in allen Ländern verfügbar. Einige Zubehörteile können zukünftigen Aktualisierungen der Bedienungsanleitung hinzugefügt werden.

Bei Arjo engagieren wir uns für die Verbesserung des täglichen Lebens von Menschen mit eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Mit Produkten und Lösungen für einen ergonomischen, sicheren Transfer von Pflegebedürftigen und ihrer hygienischen Versorgung, Desinfektion und Diagnose, sowie eine wirksame Prophylaxe von Dekubitus und venöser Thromboembolie, helfen wir Mitarbeitern im Gesundheitswesen, den Standard einer sicheren und würdevollen Pflege kontinuierlich anzuheben. Bei allem, was wir tun, stets „with people in mind“.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · SE-211 20 Malmö · Schweden · +46 (0) 10 335 45 00
 Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0
 Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hängendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 123 Wien · Österreich · +43 (0) 866 56

www.arjo.com